




HistoCore

Next Generation

Einmal - Biopsiesystem

Steriles Biopsiegerät zur histologischen Weichteil - Gewebeentnahme.

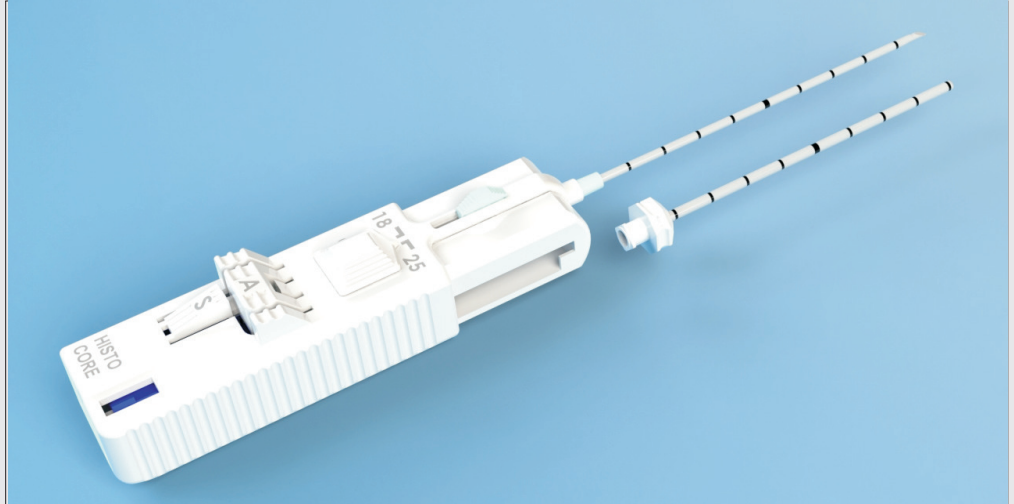

Bessere Gewebeergebnisse:

Das kraftvolle Energiespeicher-Federsystem sorgt für beste Biopsieergebnisse, wie sie bisher nur mit wiederverwendbaren Geräten erzielt wurden.

Die Möglichkeit der halbautomatischen Biopsie erhöht darüber hinaus die Gewebeausbeute für einige Applikationen deutlich.

Aufgrund der umschaltbaren Einschusstiefe (18/25mm) lässt sich das HistoCore Biopsiegerät optimal auf den Anwendungsbereich einstellen.

Geringere Nebenwirkungen:

Die kürzere Nadelspitze reduziert die Traumatisierung des Gewebes hinter dem Befund erheblich. Bedingt durch sehr geringe Fertigungstoleranzen in der Geräteproduktion konnte der Bereich zwischen Gewebesammelkerbe und Beginn der Spitzenschräge deutlich verkürzt werden.

Sichere Anwendung:

Der Status des Gerätes (gespannt, teilgespannt oder ungespannt) wird am Statusfenster angezeigt. Protpektoren neben dem Auslöser schützen vor versehentlichem Auslösen.

Koaxialkanüle:

Die optionale Koaxialkanüle ist auf dem HistoCore Gerät bereits montiert und vereinfacht die Anwendung durch eine neuartige Einhand-Koax-Entriegelung.

Verschiedene Nadelgrößen decken alle Bereiche der Weichteilbiopsie ab:

Bestellnummern:

Technische Daten:

Material: Edelstahl, Kunststoff

Gerätelänge: 123mm
Gewicht: ca. 45g

Made in Germany

Durchm. / Länge	100mm	130mm	160mm	200mm	250mm
20G/0,95mm	HC20100	HC20130	HC20160	HC20200	HC20250
18G/1,25mm	HC18100	HC18130	HC18160	HC18200	HC18250
16G/1,65mm	HC16100	HC16130	HC16160	HC16200	HC16250
14G/2,1mm	HC14100	HC14130	HC14160	HC14200	
12G/2,3mm	HC12100	HC12130	HC12160	HC12200	

(auch erhältlich als Set mit vormontierter Koaxialkanüle: "X" an Bestellnummer anhängen. z.B: HC14100X)

Patents pending

✓ **Komplett einhandbedienbar**


✓ **Wahlweise vollautomatische / halbautomatische Biopsie**



✓ **Verstellbare Einschusstiefe**




✓ **Kurze Spitze minimiert Trauma**

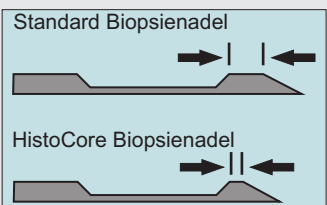

✓ **Statusfenster: gespannt / ungespannt / Entleerung**



✓ **Koax-Entriegelung mit einer Hand!**

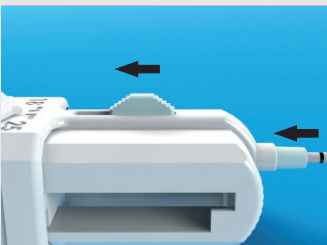

BIOMED.-INSTRUMENTE & PRODUKTE GmbH

Am Brand 1, D-82299 Türkenfeld, Germany
Tel: +49 (0)8193 9318 0 Fax: +49 (0)8193 6548
info@bipmedical.com
www.biopsiegeraete.de